

# Gebruikershandleiding Stokhouder



**Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door en volg de instructies nauwkeurig op!**


## Voorwoord

Als u even wilt gaan zitten en niet weet waar u uw wandelstok of loopkruk moet laten, kan de stokhouder een uitkomst bieden. Hang uw steun bijvoorbeeld aan een haak of plaats deze op een tafelrand. Zo vormt uw loopondersteuning in ieder geval geen sta-in-de-weg meer.

## 1. Algemene productinformatie

Zie hieronder enkele kenmerken:

- Elegante gepatenteerde stokhouder
- Zacht rubberen coating tegen wegglijden
- Haak om wandelstok of loopkruk op te hangen
- Vlakke zijde geschikt voor plaatsing op tafelranden
- Magneet voor plaatsing tegen metalen oppervlakten
- Zilverkleurige band als reflector

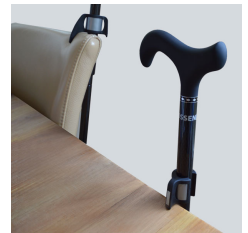

## 2. Handelingen

### Stokhouder plaatsen

Trek de rubberen stokhouder iets uit elkaar en plaats deze vervolgens om de buis van uw loopondersteuning. De haak dient te allen tijde naar beneden gericht te zijn en is bedoeld om uw wandelstok of loopkruk op te hangen. Waarschuwing: Misbruik deze haak dus niet als houder voor uw tas. Dit verhoogt het risico op vallen!



## 3. Onderhoud

Maak uw paraplustok schoon met een natte doek en indien nodig met een mild reinigingsmiddel!

## 4. Garantie

Op stokhouder geldt een garantieperiode van 1 jaar. Buiten de garantie vallen gebreken ontstaan door: niet in acht nemen van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften, anders dan normaal gebruik, slijtage, onachtzaamheid, overbelasting, ongeval door derden, toegepaste, niet originele onderdelen en gebreken waarvan de oorzaak is gelegen buiten het product (zoals brand- en waterschade).

Met deze garantie vervalt elke andere garantie; in de wet bepaald, of mondeling meegegeed, behoudens dat wat door Ossenberg schriftelijk wordt gegarandeerd.

Garanties gelden uitsluitend binnen de EU.

## 5. Afdanken

Raadpleeg uw lokale afvalinzamelingspunt bij het afdanken van uw stokhouder.

## 6. Specificaties

Materialen: Kunststof  
 Artikelnummers: 1855



**Ossenberg GmbH**

Produktion und Vertrieb  
 orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79  
 48432 Rheine  
 DEUTSCHLAND

**Telefon** +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0  
**Fax** +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

**Internet** [www.ossenberg.com](http://www.ossenberg.com)  
**E-Mail** [info@ossenberg.com](mailto:info@ossenberg.com)



Verdeler Benelux:

